

IBC 10

**Relaxační podložka s
infračerveným světlem**

NÁVOD K OBSLUZE:

1. Technický popis

- Může být použito pod prostěradlem i pod matrací
- Velikost cca 90 x 190 cm
- 2-stupňový elektronický ovladač výkonu IR záření
- Napájení: 230V, 50 – 60 Hz
- Příkon: max. 50W

Relaxační podložka s infračerveným světlem slouží k tepelné preventivní rehabilitaci a relaxaci.

Dbejte tohoto návodu k použití, aby se zabránilo škodám vzniklým nesprávným používáním!



**Přečtěte si
návod**



**Nezapichujte
špendlíky**



**Nepoužívejte
přeložené nebo
zmuchlané**

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Podložka je určena pro napájení 230V 50Hz

2. Důležitá upozornění, čtete pečlivě:

- Používejte vždy jen originální kabel pro připojení do elektrické sítě, která je uvedena na typovém štítku nebo v návodu.
- Pečlivě si prostudujte návod k obsluze, důsledně dbejte pokynů a uschovejte si jej.
- Podložku na plný výkon používejte jen omezený čas, nejdéle však **1 hodinu**.
- Rozložte infračervenou podložku na matraci (napájecí přívod podložky musí být vždy na straně hlavy).
- Podložku používejte pouze v rozloženém stavu nepoužívat přeloženou nebo zmačkanou!
- Infračervená podložka je určena k používání pod matrací nebo na matraci pod prostěradlem.
- Podložka není určena pro přímý styk s lidskou pokožkou. Doporučujeme její používání vždy pod prostěradlem z hygienických důvodů
- Nepoužívejte přístroj nikdy složený, srolovaný nebo shrnutý.
- Zařízení nesmí nikdy zůstat v zapnutém stavu bez dozoru odpovědné osoby.
- V žádném případě nepoužívejte IR podložku, pokud jakákoliv její část je poškozena nebo porušena.
- Přístroj je určen pouze k zapojení do střídavé sítě uvedeného štítkového napětí.
- Podložku nesmí používat bez dozoru bezmocní, lidé necitliví na teplo (lidé užívající kardiostimulátor, těhotné ženy po konzultaci se svým lékařem, děti bez dohledu odpovědné osoby).
- Nezapichujte do podložky špendlíky, ostré a špičaté předměty.
- Napájecí kabel a ovladač nesmějí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Netahejte a netočte přívodním kabelem podložky.
- K odstranění malých znečištění nebo případných skvrn na podložce můžete použít vodou navlhčený hadřík nebo houbičku. Pak pečlivě usušte na vzduchu. Nežehlete.
- **Podložka nesmí být zapnuta, pokud je vlhká /mokrá .**
- Pokud použijete IR podložku na nastavitelném lůžku, zkontrolujte, zda podložka nebo přívod nemohou být zachyceny, mechanicky poškozeny nebo zmačkány.
- Podložku nesmějí ovládat malé děti, v případě že podložku používají malé děti, na tento provoz musí dohlížet pouze jejich odpovědní zástupci.
- **Poškozená podložka nesmí být vůbec používána.**
- Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, smí ji opravit (vyměnit) pouze v opravných stanovených výrobcem, aby se zabránilo možnosti úrazu el. proudem.
- Tento spotřebič není určen pro lékařské použití v nemocnicích, kde jsou vyžadovány jiné technické parametry (operační sály a podobně).
- Pokud infračervenou podložku nepoužíváte, ukládejte ji v suché místnosti s pokojovou teplotou.

3. Popis a použití:

System se skládá z infračervené ložní podložky o velikosti cca 90 x 190 x 2 cm s již vřitým infračerveným článkovým zářičem 60 x 160 cm a komfortním ovladačem s jednoduchou obsluhou.

Infračervená podložka využívá ke svému působení infračervené záření. Relaxační a regenerační infračervené záření proniká do tkáně od 2 do 30 mm hloubky. IR záření vydávané Infračervenou podložkou IBC10 blahodárně působí na lidský organismus tím, že jej prohřívá a má relaxační a regenerační účinky.

Nedá se tedy v podobné oblasti působení ani svoji strukturou a technickým řešením srovnávat např. s topnou dečkou, topným polštářkem nebo jinými ohřívacími lůžkovými prostředky a doplňky.

Podložka je určena především do místností – ložnic, kde se teplota pohybuje mezi 16 – 20°C.

Relaxační podložka s infračerveným světlem IBC 10 je koncipována pro každodenní domácí použití, nejedná se tedy o zdravotnický prostředek dle definice uvedené v § 2 zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, určený pro použití ve zdravotnických zařízeních.

4. Zapojení infračervené podložky:


1. Zkontrolujte, zda podložka není poškozena.
2. Podložku zapojte pomocí přívodního kabelu do zásuvky 230 V. Podložku správně umístěte na matraci nebo pod matraci. Jen takto lze dosáhnout požadovaného spektra infračerveného záření. Na Vaše tělo pak bude působit infračervené záření, jehož intenzitu si můžete navolit pomocí komfortního ovladače.
3. Na ovladači navolte požadovaný stupeň intenzity IR záření
 - a) na I. stupni přepínače v rozsahu 16-18 °C – dlouhé vlny - malá intenzita - velké proniknutí IR záření
 - b) nebo na II. stupni přepínače v rozsahu 22-24 °C- kratší vlnové délky - vyšší intenzita – menší hloubkové proniknutí IR záření.

Takto slouží přepínač výkonu Vaší infračervené podložky:

Před ulehnutím zapněte podložku na plný 2. stupeň na cca. 30-40 minut.

Na noc může zůstat podložka zapnuta na teplotní stupeň 1.

Přepínač v polohách – 0 – infračervená podložka je bez proudu.

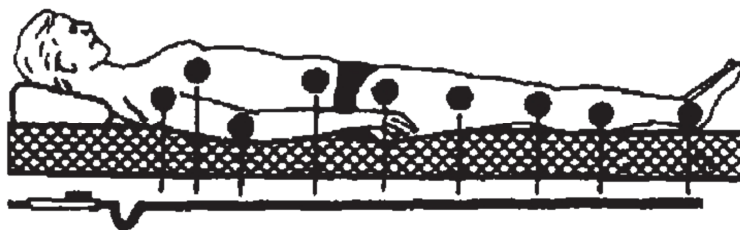

Pokud podložku použijeme přímo pod prostěradlo, nebo spodní deku, měníme tím i teplotní charakter vyzařování jak na I., tak na II. spínacím stupni. V tomto případě je možné dosáhnout i vyšších provozních teplot, které budou působit na lidský organismus. Výše uváděné provozní teploty na povrchu podložky se mohou zvýšit v závislosti na vyšší okolní teplotě (např. 25°C) až 30 - 32 °C na I. přepínacím stupni nebo na 38 - 40 °C při použití II. stupně.

Podložku umístěte tak, jak je znázorněná na výše uvedeném obrázku. Tak budou infračervené paprsky působit rovnoměrně na celé tělo kromě hlavy.

Podložku nepoužívejte při akutních zánětlivých stavech. V případě jiných závažných onemocnění je nutné použití podložky konzultovat s lékařem.

5. Popis infračerveného záření:


Použití infrazáření při revmatických potížích má dlouhou tradici v preventivní rehabilitaci a relaxaci. Užitečnost tepelné relaxace převážně závisí na stupnici zdravotních potíží a pohody lidského těla. Infračervené záření je důležitý element fyzikální relaxace a preventivní rehabilitace.

Relaxační úspěch také závisí na typu použití infračerveného záření (vlnové délky).

Relaxační působení infračerveného záření v podstatě spočívá v proudění elektronů rozkmitaných v infračerveném poli prostupující do tkáně lidského organismu.

Při infračerveném záření – opakem k UV – záření – je méně rozhodující celková dávka než intenzita současně aplikovaného záření. Podle vlnové délky proniká infračervené záření do tkáně od 2 do max. 30 mm hluboko.

IR záření má analgetický a spasmolytický účinek, působením na organismus dojde k zahřání a aktivně většímu prokrvení tkáně ozářovaného místa se sekundárním odrazovým působením v hluboko ležících a kontralaterálních úsecích těla

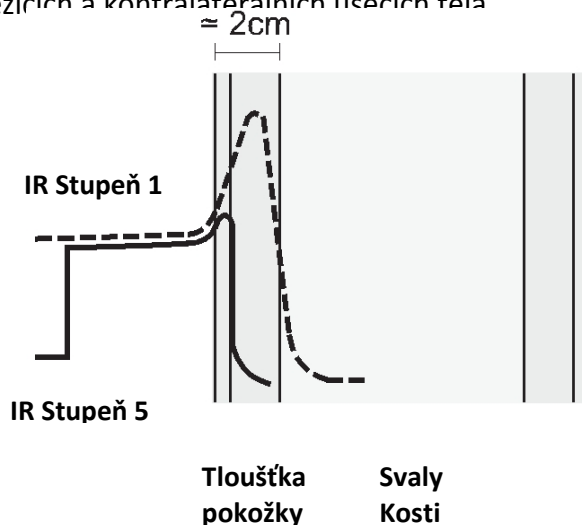

6. Čištění:

Podložku je nutné čistit od nečistot a skvrn. Před zahájením čištění je nezbytné vypojit přívodní kabel ze zásuvky.

Chraňte podložku zejména před ostrými předměty a ostrým přehýbáním. Dále před působením organických rozpouštědel, působením čistících prostředků obsahující aceton nebo čpavek či prostupujících do tkáně lidského organismu.

Infračervenou podložku čistěte pouze měkkou, vlhkou tkaninou nebo vlhkou houbičkou.

Podložku po vyčištění a před opětovným používáním nechte řádně uschnout. Podložka se nesmí namočit.

7. Údržba:

Infračervená podložka je bezúdržbová. V případě, že podložka nefunguje, uživatel je povinen zkontrolovat přívodní kabel, jeho správné zapojení do funkční elektrické sítě a správně (dle návodu) zapnout přístroj ovladačem.

Není-li ovladač v poloze 1 nebo 2, infračervená podložka nepracuje

V případě, že ani po těchto krocích nebude možno podložku uvést do provozu, okamžitě kontaktujte reklamační oddělení prodejce nebo pozáruční servisní středisko uvedené v tomto návodu. Pokud nastane jakákoliv porucha, odpojte přívodový kabel ze síťového napájení a dále podložku nepoužívejte!

Opravy podložky mohou provádět pouze specialisté výrobní firmy. **Dojde-li k tomu, že do podložky nebo do ovladače a síťového kabelu vnikne jakákoliv kapalina nebo cizí předmět, vyjměte okamžitě vidlici přístroje ze síťové zásuvky a postupujte dle pokynů uvedených v návodu.**

Okamžitě kontaktujte reklamační oddělení prodejce nebo servisní středisko uvedené v tomto návodu také v těchto případech, pokud je:

1. poškozený přívodní kabel
2. podložka nefunkční – nejprve však znovu zkontrolujte správnost zapojení
3. mechanicky poškozená podložka

ZÁRUKA

Na všechny části relaxační podložky platí záruční lhůta v délce 24 měsíců.

Reklamace:

- Pouze s prodejním dokladem.
- Pouze při skutečných záručních případech, tj. při materiálových nebo výrobních chybách, při neporušení identifikačního štítku u sériových čísel.
- Při nepovoleném způsobu užívání a mechanickém poškození záruční lhůta neplatí.

Výrobce a autorizovaný servis:

I.B.C. NV, a.s.
Žižkova 1089
CZ-395 01 Pacov

tel: 565 444 266
e-mail: ibc@ibc-pacov.cz

Vyrobeno v České Republice

8 . Záruční podmínky:

1. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.
2. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
3. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení dokladu o koupi s označením výrobku, datem a čitelným razítkem výrobce nebo prodejce.

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy
- jakékoliv změny v záručním dokladu provedené neoprávněnou osobou
- odstranění identifikačních štítků výrobku
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, a než je uvedeno v tomto návodu, zejména pokud byl používán k profesionální nebo jiné výdělečné činnosti

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.

9. Likvidace přístroje:

Přístroj předejte k ekologické likvidaci v jakémkoli sběrném dvoře v místě Vašeho bydliště, nebo výrobci.

Likvidace přístroje musí být provedena v souladu s nařízením vlády (evropské direktivy) – zákon 185/2001 Sb. (2002/95/EC) o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Životnost přístroje je stanovena na 10 let.

ES prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě

1) My: **I.B.C. NV a.s., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město**
IČ: 24821888

tímto prohlašujeme,

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost:

Název:	Infračervená podložka
Typ:	IBC 10
Technické parametry:	příkon 50 W, Jmenovité napětí 230 V AC
Výrobce, místo výroby:	I.B.C NV a.s., Žižkova 1089, 395 01 Pacov

Příslušná nařízení:

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení: Nařízení vlády č.17/2003Sb., se kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Nařízení vlády č. 616/2006Sb., se kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Nařízením vlády č. 481/2012 Sb., (směrnice evropského parlamentu a rady 2011/65/EU) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003/A14:2010(EN 60335-1:2002/A14:2010)
ČSN EN 60335-2-17 ed.2:2003 (EN 60335-2-17:2002)

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

2) Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s TUV CZ s.r.o.,
Novodvorská 994, 14221 Praha 4, IČO 63987121 – Inspekční orgán č. 4002

Certifikát: e.č. 06.478.398 ze dne 21. 2. 2013, platný do: 29. 3. 2017

V Pacově dne

15.4.2014



Voves Vladimír,
jednatel

Jméno a funkce odpovědné osoby

I.B.C. NV a.s.
Žižkova 1089
395 01 Pacov
DIČ: CZ24821888

CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo **06.478.398**

vydaný výrobcí:

I.B.C. NV a.s.
Fügnerovo nám. 1808/3
CZ - 120 00 Praha 2
IČ: 24821888

na výrobek:

Název: **Infračervená podložka**
 Typové označení: **IBC 10**
 Modifikace: ---
 Místo výroby: **I.B.C. NV a.s., Žižkova ulice 1089, CZ - 395 01 Pacov**

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu Pokyn ISO/IEC 67 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 05.640.089 ze dne 20.03.2012.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 60335-1ed.2:2003/A14:2010 (EN 60335-1:2002/A14:2010),
ČSN EN 60 335-2-17ed.2:2003 (EN 60 335-2-17:2002)

Tento certifikát platí do: **29.03.2017**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze, dne 21.02.2013



vedoucí certifikačního orgánu